





## NUTRITONE MICROSIZER

### **Attenzione**

Controindicazioni - Nel caso soffriate di condizioni cliniche quali: pressione alta, pacemaker, epilessia, sclerosi multipla o se siete in stato di gravidanza, vi preghiamo di consultare il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto.

Nessuno ama pensare alla propria età che avanza. Tuttavia, il cambiamento avviene comunque, gradualmente e certamente. Purtroppo, il viso è la prima parte del corpo a mostrare i segni causati dall'invecchiamento, dall'ambiente e dai cambiamenti che avvengono nella sottostante rete muscolare.

NUTRITONE MICROSIZER è la nostra arma segreta per una pelle più giovane! Abbiamo preso una classica tecnologia di stimolazione elettronica, normalmente utilizzata su tutto il corpo, e l'abbiamo affinata e regolata a dovere. Abbiamo inserito questa tecnologia all'interno di un utensile dalla punta sottile, in modo che possa agire sia intorno che direttamente sul contorno occhi e la zona labbra/bocca.

Progettato per puntare ed agire sul contorno occhi e sulla zona del labbra/bocca, questa piccola centrale elettrica mette efficacemente in movimento i piccoli muscoli del vostro viso, aumentandone gradualmente il volume. Il rassodamento dei muscoli del viso riduce la comparsa di linee sottili e rughe. È quasi come portare la faccia in palestra!

NUTRITONE MICROSIZER è uno stimolatore elettronico facile da usare che invia delle micro-correnti di energia elettrica nei muscoli. Per ripristinare occhi e le labbra, vi occorreranno solo pochi minuti ed otterrete un look più giovane e rinvigorito: amerete i risultati!

## Preparazione del macchinario

1. Inserite la batteria aprendo l'apposito sportellino posizionato al di sotto della Base dell'unità.
2. Prendete i sieri conduttivi (siero occhi, siero labbra o qualsiasi siero conduttore) ed applicatelo sul viso o sull'area da trattare.
3. Accendete la base dell'unità premendo il tasto rosso.
4. Applicare il dispositivo sul viso e avviare la procedura. Regolate il livello di intensità spostando il selettore di intensità. Scegliete la forza in base alla quantità di micro corrente con cui vi trovate più a vostro agio.
5. Importante. livello di intensità utilizzato per la zona occhi deve essere la metà di quello utilizzato sul viso.

Avviso molto importante: In alcuni casi, dopo aver eseguito correttamente le procedure di preparazione della macchina, è possibile che non percepiate alcuna micro-corrente. Ciò è generalmente dovuto a vari motivi riguardanti i tipi di pelle e le diverse superfici di quest'ultima, e/o il processo di conduzione nell'insieme. Per migliorare la conduttività, assicuratevi che il dispositivo sia acceso e che la sonda sia a contatto con una superficie di pelle umida.

## Preparazione personale

Iniziate pulendo il vostro viso (area occhi e labbra), rimuovendo tutto il trucco come fareste normalmente. Per migliorare i risultati quando si utilizza il Microsizer, assicuratevi di posizionarvi di fronte ad uno specchio in un ambiente ben illuminato in modo da potervi concentrare sulle aree da trattare.

### OCCHI

Sopracciglia (muscolo corrugatore e procero)

- Posizionate la sonda a partire dal bordo interno del sopracciglio. Attendete 10 secondi.
- spostatevi verso il centro del sopracciglio. Attendete 10 secondi.
- spostatevi verso l'estremità del sopracciglio. Attendete 10 secondi.
- Ripetere sull'altro sopracciglio.
- La sonda dovrebbe sollevarsi e adattarsi perfettamente al ventre del muscolo.



## Occhi - Parte inferiore (muscolo orbicolare dell'occhio)


- Posizionate la sonda sul bordo interno dell'occhio. Attendete 10 secondi.
- Posizionate al centro della parte bassa dell'occhio (dove vengono a crearsi le occhiaie ed il gonfiore). Attendete 10 secondi.
- Posizionare la sonda sull'angolo esterno dell'occhio (dove si formano le zampe di gallina). Attendete 10 secondi.
- Ripetere sull'altro occhio.



## Bocca (Muscolo orbicolare della bocca)

### Labbro inferiore

- Imbronciate le labbra.
- Posizionate la sonda sull'angolo destro della bocca appena sotto il labbro. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sulla parte centrale destra del labbro. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sulla parte centrale sinistra del labbro inferiore. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sull'angolo sinistro della bocca, sotto il labbro inferiore. Attendete 10 secondi.
- Ripetere 2 volte.

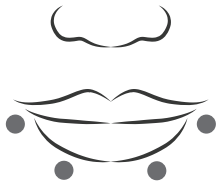

## Labbro superiore

- Imbronciate le labbra.
- Posizionate la sonda sull'angolo destro della bocca appena sopra il labbro superiore. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sulla parte centrale destra del labbro superiore. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sulla parte centrale sinistra del labbro superiore. Attendete 10 secondi.
- Posizionate la sonda sull'angolo destro della bocca appena sopra il labbro superiore. Attendete 10 secondi.
- Ripetere 2 volte.





## ISTRUZIONI PER LA BATTERIA



**1. RIMUOVERE IL COPERCHIO DELLA BATTERIA SPINGENDO VERSO IL BASSO E TIRANDO VERSO L'ALTO**



## ISTRUZIONI PER LA BATTERIA



**2. INSERIRE LE BATTERIE  
COME DA IMMAGINE  
SOPRA**



**3. INSERIRE NUOVAMENTE  
IL COPERCHIO DELLA  
BATTERIA SPINGENDO  
GIU' E TIRANDO VERSO IL  
BASSO**

Isomers® Laboratories Inc.  
Toronto, Canada, M6B 1W3

416.787.2465

30 Jamesclose, Woodland  
London UK NW11 9QX

[www.isomers.ca](http://www.isomers.ca)